Hyperoil®

Prípadové štúdie

Multifunkčná Samoliečba
Pokrokové Liečenie Rán

VRED NA CHODIDLE


Deň 0


Deň 7


Deň 19

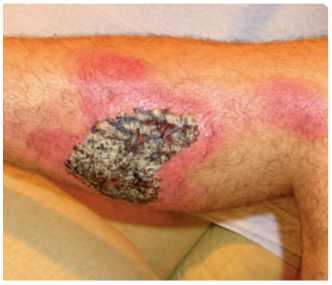

Deň 55

76-ročný muž. Diabetes mellitus II. typu, závislý od inzulínu; bolesť chodidla pri chôdzi. Vred na chodidle: hĺbka 5 mm, plocha 3 cm^2. Prítomnosť vredu: 6 mesiacov, zhoršený distálnou trombózou tretieho prsta a tvorbou fistúl medzi 2. a 3. a 3. a 4. intermetatarzálnym kĺbom; bolestivé (VAS:10). Liečba s HYPEROIL® GÁZAMI 10 dní, potom každé 2 dni, kým sa vred celkom nezahojil. CELKOVÉ UZDRAVENIE O 55 DNÍ.

LÝTKO – POPÁLENINY I. A II. STUPŇA


Deň 0


Deň 3


Deň 6


Deň 23

21-ročný muž. Popáleniny I. a II. stupňa na lýtku spôsobené kontaktom s výfukom motocykla. Liečba s HYPEROIL® GÁZAMI počas spánku a HYPEROIL® GÉL SPREJOM dvakrát denne. CELKOVÉ UZDRAVENIE O 23 DNÍ.

POOPERAČNÉ RANY NA PRSIACH


Deň 0 (pravý prsník)


Deň 27 (pravý prsník)

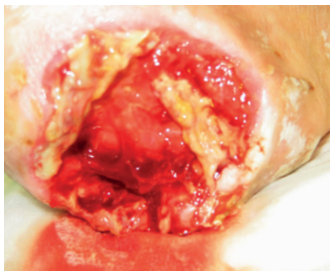

Deň 0 (ľavý prsník)

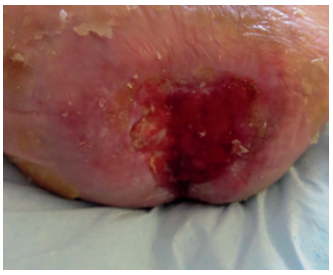

Deň 27 (ľavý prsník)

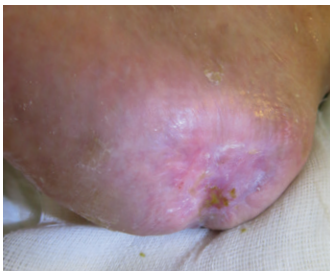
24-ročná žena. Chirurgické zmenšenie prsníkov, pooperačné rany na oboch prsníkoch (kvôli alergickej reakcii). Liečba s HYPEROIL® OLEJOM a GÁZAMI, denná výmena obväzov. PRIJATEĽNÝ STAV NA 27.DEŇ.

DEKUBIT NA PÄTE


Deň 0


Deň 7


Deň 21


Deň 42

69-ročný muž. Vážna choroba, v kachektickom stave. Dekubit IV.stupňa na ľavej päte. Podstúpil chirurgický debridement kvôli nekrotickému ložisku. Liečba s HYPEROIL® GÁZAMI a OLEJOM 3-krát denne po dobu 15/20 dní. Následne ošetrovanie 2-krát týždenne. CELKOVÉ UZDRAVENIE O 42 DNÍ.

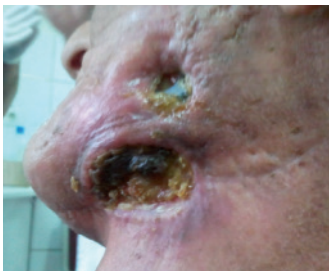
info@hyperoil.com - ph.: +39 0535 25755
www.hyperoil.com

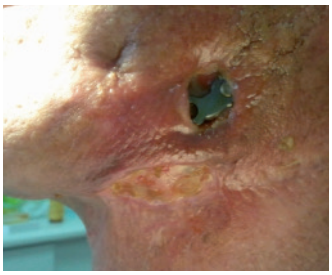
Pred použitím si pozorne prečítajte upozornenia a návod.

Zdravotnícke pomôcky triedy IIb

HOLOIL SYSTEM
RI.MOS. Disposable Medical Products

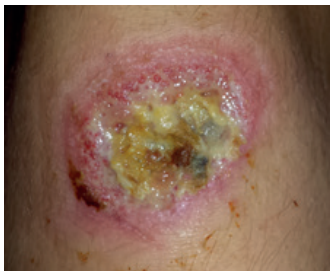
MAXILOFACIÁLNA RAKOVINA


Deň 0


Deň 35

54-ročný muž. Maxilofaciálna rakovina (čeľuste a tváre) ošetrovaná s gél sprejom HYPEROIL® , ktorý bol uprednostnený pred olejovou formou pre lepšiu roztierateľnosť. Ošetrovanie bolo opakované každé 2 dni. V 35.dni bola jediná nevyliečená oblasť prekrývajúca kovový implantát v čeľusti. Liečba pokračovala s gél sprejom HYPEROIL® a HYPEROIL® gázami.

ODRENINA KOLENA

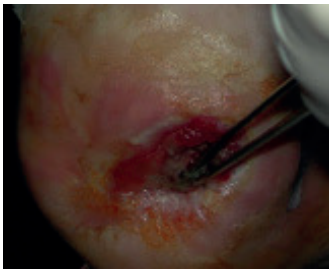

Deň 0


Deň 60

14-ročné dievča. Odrenina kolena s prítomnosťou fibrínu a nekrózy tkaniva. Ošetrovanie s HYPEROIL® olejom raz denne.
CELKOVÉ UZDRAVENIE O 60 DNÍ.

VRED NA PÄTE


Bazálny vred ošetrovaný s hydrokoloidom 4 mesiace.

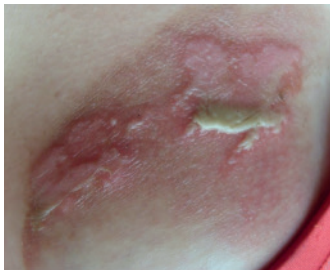

Odstránenie fibrínu a nekrózy.


Deterzia a tvorba granulačného tkaniva po 15 dňoch ošetrovania s Hyperoil®.


VYLIEČENIE O 121 DNÍ.

90-ročná žena s Alzheimerovou chorobou. Preležanina na pravej päte 4 mesiace (HĺbKa 16 mm). Tlakový vred s odhalením tkaniva a kosti bolo ťažké vyliečiť napriek správnej liečbe s použitím modernej medikácie.
CELKOVÉ UZDRAVENIE S HYPEROIL O 121 DNÍ.

POPÁLENINA II.STUPŇA


Deň 0


Deň 5

Popálenina II. stupňa kvôli obareniu horúcim nápojom.
Liečená s olejom HYPEROIL®.
CELKOVÉ UZDRAVENIE O 7 DNÍ.

POPÁLENINA TRENÍM


Deň 0


Po 2 týždňoch

15-mesačné dieťa. Popálenina chodidla spôsobená trením o pneumatiku bicykla. Denné umývanie fyziologickým roztokom a aplikovanie HYPEROIL® OLEJA. Po takmer úplnom uzdravení: ošetrovanie s HYPEROIL® GÁZAMI.
CELKOVÉ UZDRAVENIE PO 2 TÝŽDŇOCH OD ZAČIATKU LIEČBY.

VENÓZNE VREDY NA NOHE


Deň 0


Deň 7


Deň 21


Deň 50

66-ročná žena. Obézna, vysoký krvný tlak; pacientka liečená antikoagulanciami kvôli arytmogénnej kardiomyopatii. Chronická venózna nedostatočnosť dolných končatín. Prítomnosť vredov 4 mesiace. Nereagujúce na konvenčnú liečbu, ani s použitím modernej medikácie. Dva typy venóznych vredov na ľavej nohe v oblasti nad členkom. Veľkosť: 3 cm x 2,5 cm x 2 cm – nebolestivé – mierny exsudátový biofilm a kolonizácia mierneho stupňa. Ošetrovanie s HYPEROIL® OLEJOM a HYPEROIL® GÁZAMI od 9.1.2012. Výmena obväzov: 3-krát týždenne, s aplikovaním kompresívnej terapie s viacvrstvovým bandážovaním. Po 1 týždni bola evidentná redukcia biofilmu a tvorba granulačného tkaniva. Počas nasledujúcich týždňov sa vytváralo ďalšie granulačné tkanivo a začal proces reepitalizácie. CELKOVÉ UZDRAVENIE O 60 DNÍ.

COD. 100810M-SK REV. OCTOBER 2019

info@hyperoil.com - ph.: +39 0535 25755
www.hyperoil.com

⚠ Pred použitím si pozorne prečítajte upozornenia a návod.

Zdravotnícke pomôcky triedy IIb

HIO OLI HOLOIL SYSTEM
RI.MOS. Disposable Medical Products